



MITOWELL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MW300 PRO

MW600 PRO

MW1500 PRO

MW2000 PRO

MW3000 PRO




MITOWELL



SPIS TREŚCI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA	4
CZAS NAŚWIETLANIA & CZĘSTOTLIWOŚĆ	4
CZYM JEST TERAPIA CZERWONYM ŚWIATŁEM	5
INSTALACJA I URUCHOMIENIE	7
MONTAŻ PODSTAWY JEZDNEJ	7
FUNKCJE I SPOSÓB STEROWANIA	8
FUNKCJA REGULACJI PULSOWANIA	10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	11
PRZECIWWSKAZANIA	16
POTENCJALNE SKUTKI UBOCZNE	16
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	17
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA URZĄDZENIA	18
UTYLIZACJA	18
GWARANCJA & SERWIS	19
PRODUCENT & IMPORTER & DEKLARACJA ZGODNOŚCI	20
OSTRZEŻENIA & ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI	20

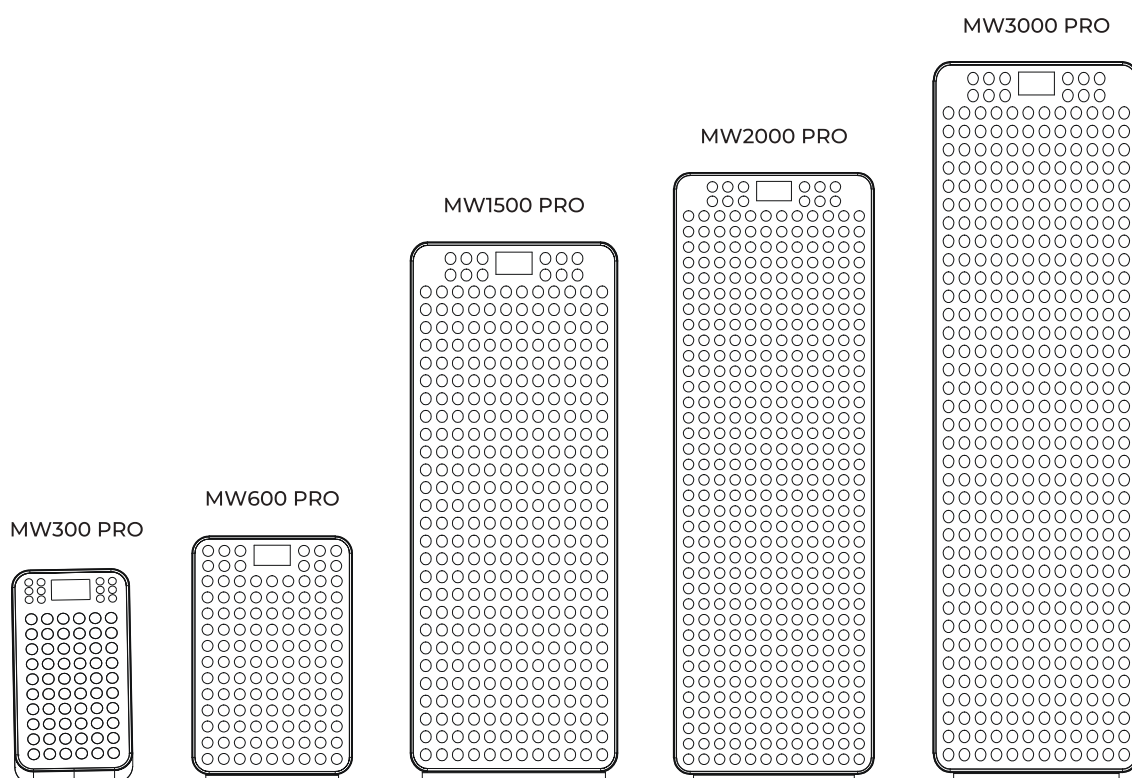

WSTĘP



WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Produkty Mitowell do terapii czerwonym światłem nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Nasze produkty są niskiego ryzyka, przeznaczone do branży wellness / fitness.

Zostały zaprojektowane w celu wspierania ogólnego stanu zdrowia poprzez stymulację procesów komórkowych. Produkt nie jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń w domu.

W przypadku wątpliwości co do wpływu terapii na zdrowie należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.




CZAS NAŚWIETLANIA & CZĘSTOTLIWOŚĆ

Dla optymalnych korzyści, w tym oddziaływania na tkanki głębokie, zalecane są sesje trwające 5-20 minut dla każdego obszaru, który chcesz poddać terapii, w odległości około 15-30 cm od urządzenia.

Dobłą praktyką jest rozpoczynanie terapii od krótszych sesji i wydłużenie ich w zależności od reakcji organizmu. Maksymalnie można naświetlać dwa do trzech obszarów dziennie, zalecana przerwa między sesjami to 6 godzin.

Czas i odległość mogą różnić się w zależności od indywidualnej reakcji na terapię. Światło podczerwone (830nm + 850nm) oddziałuje na tkanki głębokie, a czerwone światło (630nm + 660nm) jest korzystne dla skóry. Ponadto istnieje wiele innych korzyści.

Oba rodzaje światła można używać jednocześnie i jest to zalecane, ponieważ światło czerwone i podczerwone się uzupełniają.

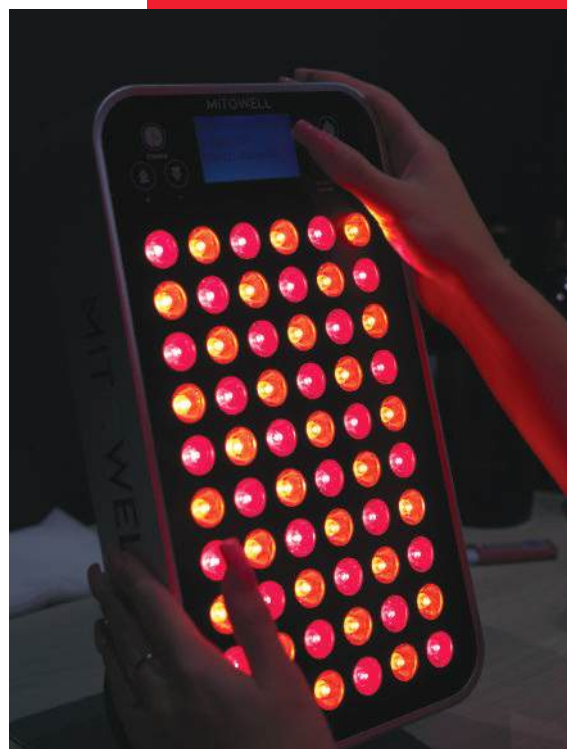

OCHRONA OCZU


Ochrona oczu nie jest konieczna, nie zalecane jednak jest bezpośrednie patrzenia na diody LED. Jeżeli światło jest dla Ciebie niekomfortowe możesz skorzystać z okularów dołączonych do zestawu.

UBRANIA

Upewnij się, że obszar ciała, który poddajesz zabiegowi, jest całkowicie wystawiony na działanie światła i nie jest zakryty żadną tkaniną ani ubraniem, może to obniżyć korzyści płynące z terapii.

CZYM JEST TERAPIA CZERWONYM ŚWIATŁEM

Terapia światłem jest jedną z najstarszych znanych metod leczenia. Pierwsze zastosowania terapii słonecznej odnotowano w Egipcie, a różne formy terapii światłem były również praktykowane przez starożytnych Greków, Chińczyków i Hindusów

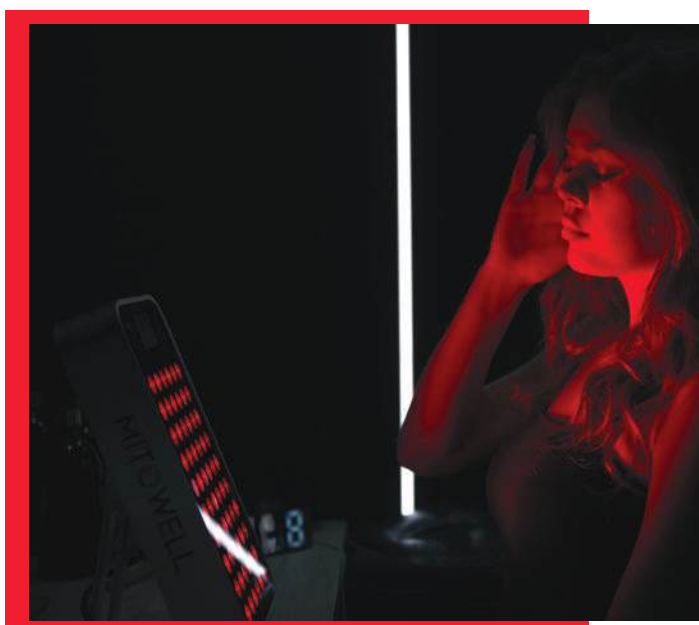

Nie ma wątpliwości, że światło wpływa biologicznie na organizm; w rzeczywistości, zdrowy organizm potrzebuje światła.

Obecne badania potwierdzają, jak różne długości fal świetlnych wpływają na ciało na poziomie komórkowym.

Wszystkie długości fal świetlnych mieszczą się w pewnym spektrum. Czerwone i podczerwone światło o długości fali 630, 660 oraz 830, 850 nanometrów (nm) jest szczególnie korzystne.

Istnieją dwa kluczowe mechanizmy odpowiadające za skuteczność terapii czerwonym światłem:



Stymulacja Produkcji ATP


Terapia ta oddziałuje na mitochondria w komórkach, które są "elektrowniami" produkującymi energię w postaci ATP. Dzięki naświetlaniu czerwonym światłem, produkcja ATP jest zwiększana, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie komórek i całego organizmu.



Hormeza

Krótkotrwałe naświetlanie skóry czerwonym światłem może wywołać niewielki stres w komórkach, co w efekcie prowadzi do wzmocnienia ich naturalnych mechanizmów obronnych. To z kolei wpływa na lepszą odporność i ogólne zdrowie

W praktyce oznacza to, że terapia czerwonym światłem może poprawić procesy komórkowe i zwiększyć odporność organizmu. Jest to metoda wspomagająca zdrowie na poziomie komórkowym. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w naszym poradniku dotyczącym terapii czerwonym światłem, który został dołączony do lampy.

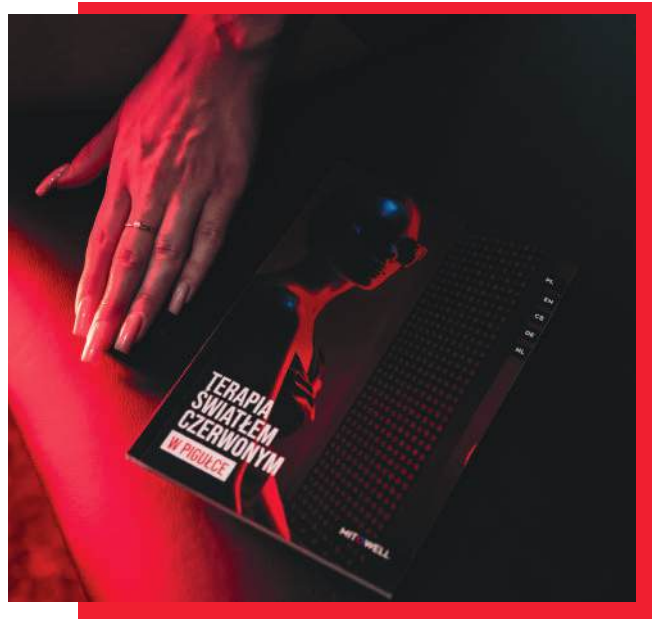


INSTALACJA I URUCHOMIENIE

- 1 Wyjmij urządzenie z opakowania.
- 2 Przed użyciem urządzenia usuń całe opakowanie.
- 3 Przed użyciem sprawdź, czy obudowa, kabel zasilający nie posiadają widocznych uszkodzeń.
- 4 Połóż urządzenie na prostej, stabilnej powierzchni.
- 5 Upewnij się, że podłączasz urządzenie do sieci o napięciu zgodnym z tym, które znajduje się na tabliczce znamionowej.
- 6 Kabel sieciowy podłącz w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe potknięcie się o niego.


MONTAŻ PODSTAWY JEZDNEJ

Wersje MW1500 PRO i MW2000 PRO oferują możliwość opcjonalnego montażu kółek, co ułatwia przemieszczanie lampy. Dzięki tej funkcji transport urządzenia staje się wygodniejszy i bardziej praktyczny.

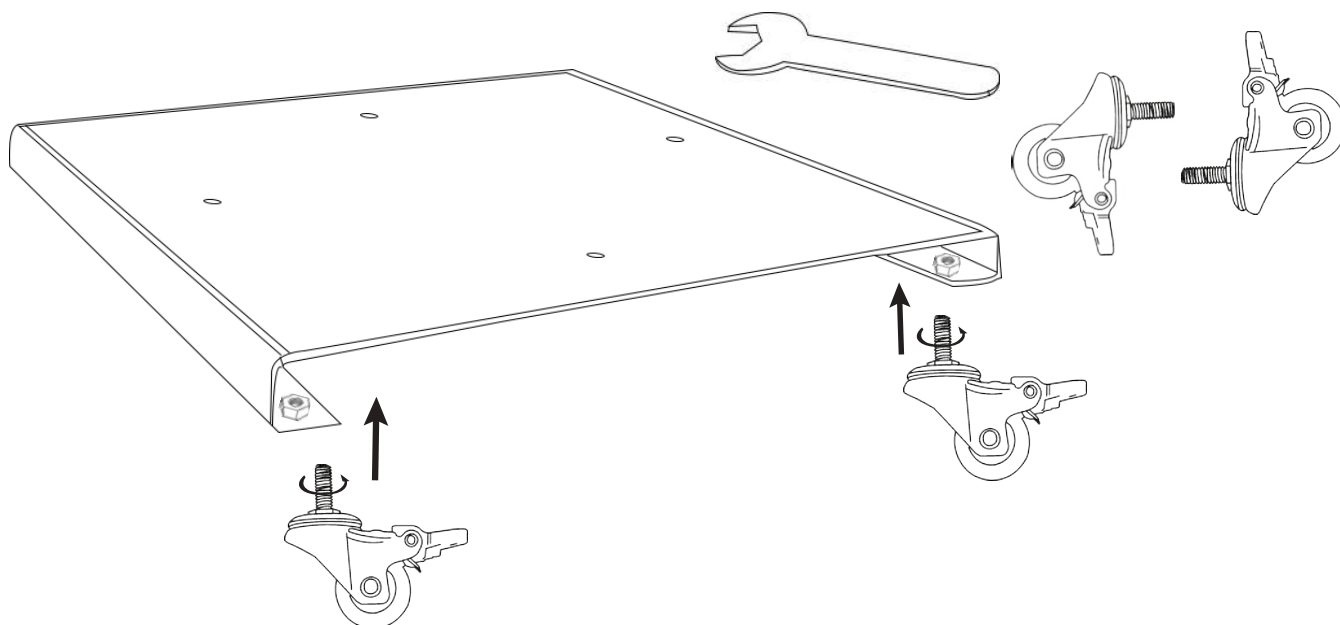

Do platformy w wyznaczonym miejscu włóż kółka (patrz infografika), następnie z pomocą dołączonego klucza dokręć gwint kółka zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powtórz tę czynność w każdym rogu platformy.


FUNKCJE I SPOSÓB STEROWANIA

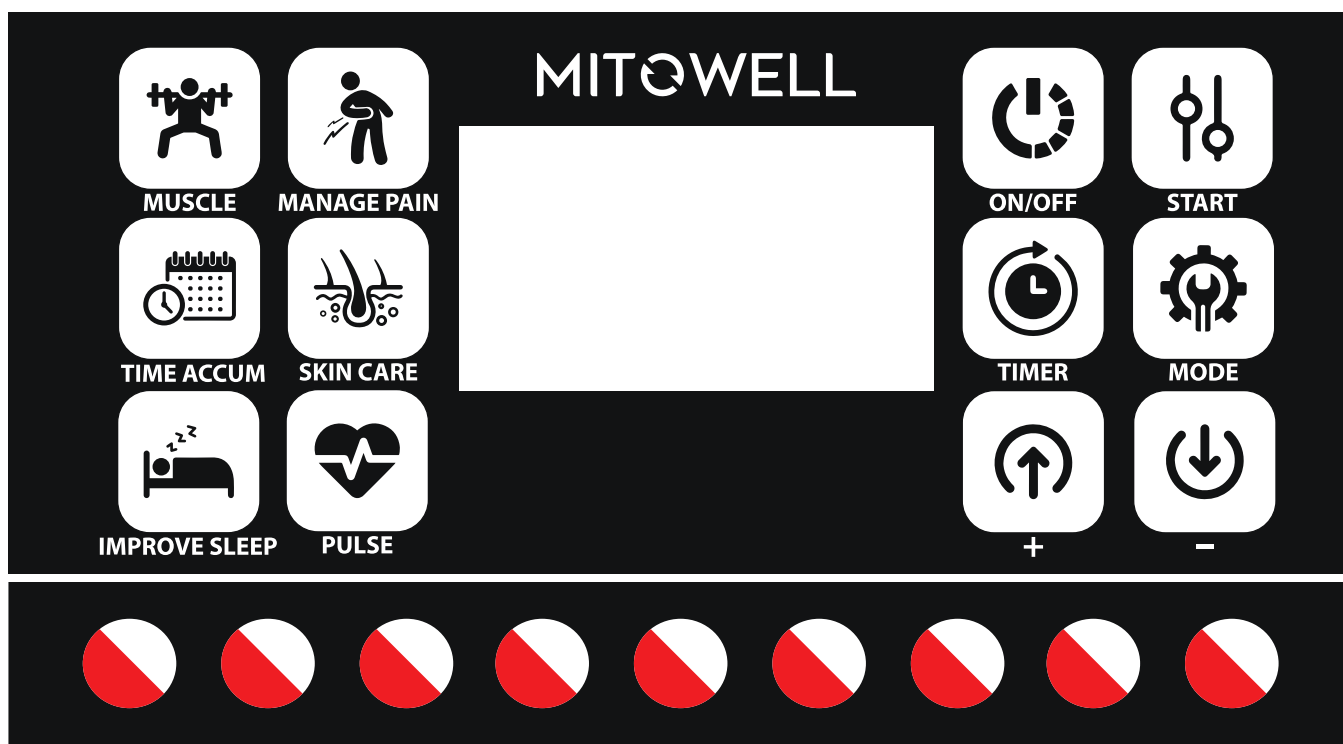


MANAGE PAIN
Tryb wsparcia redukcji bólu
(RED 100% + NIR 100%)



MUSCLE
Tryb wsparcia mięśni
(RED 50% + NIR 100%)



PULSE
Tryb pulsowania
1-1000 Hz



SKIN CARE
Tryb wsparcia pielęgnacji skóry
(RED 100% + NIR 0%)



IMPROVE SLEEP
Tryb wsparcia poprawy snu
(RED 50%)



TIME ACCUM
Licznik roboczogodzin
lampy




ON/OFF
Włączenie i wyłączenie lampy
do terapii światłem czerwonym.



MODE
Dostępne 3 tryby:
NIR, RED, RED i NIR




START
Rozpoczęcie pracy
oraz pauza pracy lampy



TIMER
Czasomierz od 1 do 60 minut
Domyślny czas: 30 minut




+
Jasność w górę: 10 ~ 100%
Czasomierz/Zwiększenie: 1 ~ 60 min
Pulsowanie: 1 ~ 1000 Hz




-
Jasność w dół: 100 ~ 10%
Czasomierz/Zmniejszenie: 60 ~ 1 min
Pulsowanie: 1000 ~ 1 Hz

Wskazówki dotyczące korzystania ze zdalnego pilota:

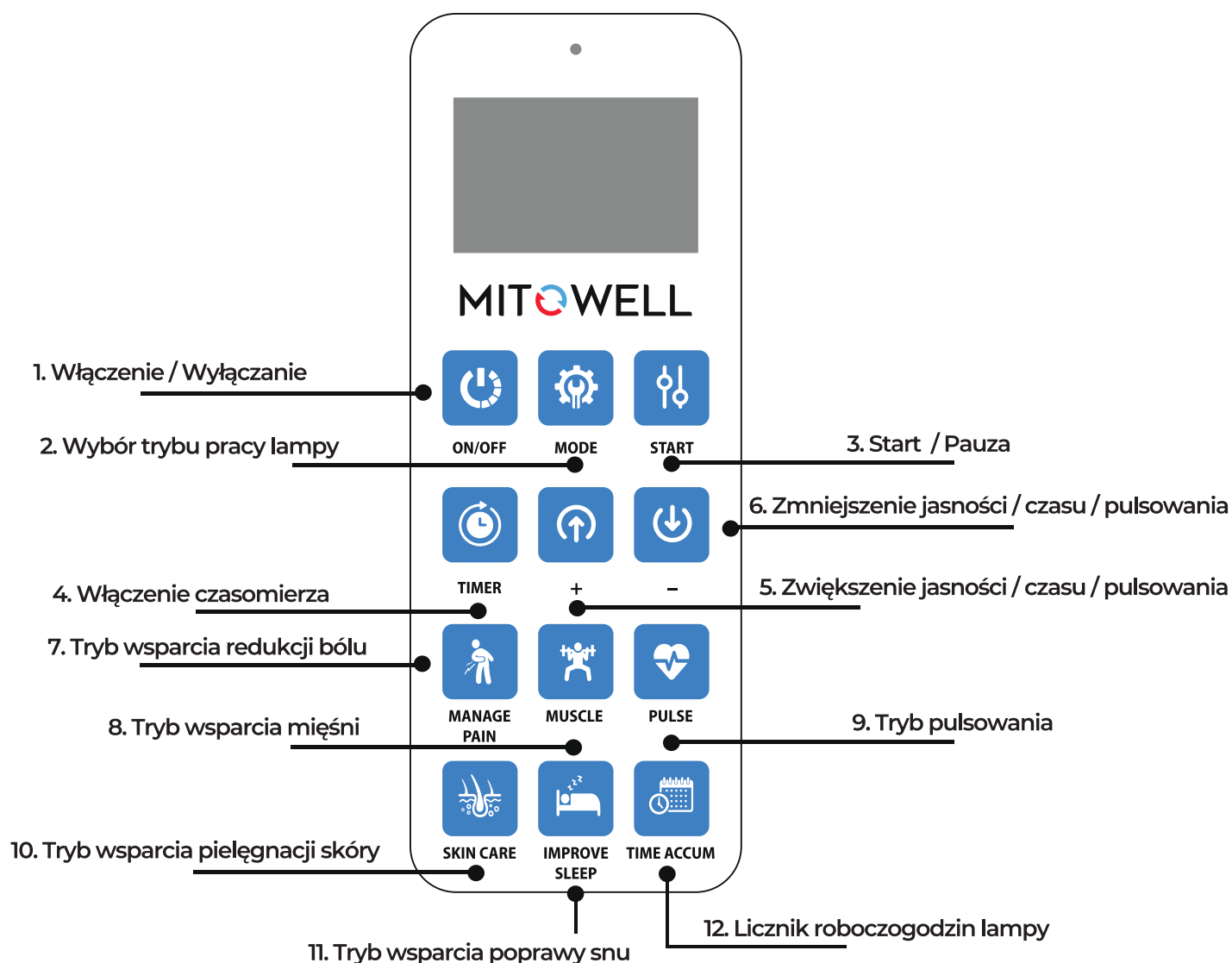

KONTROLA WIELU PANELÓW

Jeden pilot może sterować wieloma urządzeniami w tym samym czasie.

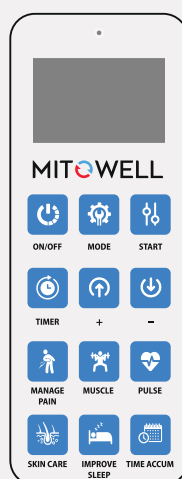

FUNKCJA REGULACJI CZĘSTOTLIWOŚCI PULSOWANIA (1–1000 HZ)

Urządzenie do terapii światłem czerwonym wyposażone jest w funkcję regulacji częstotliwości pulsowania w zakresie od 1 do 1000 Hz. Regulacja ta pozwala dostosować intensywność i charakter działania terapii, co umożliwia precyzyjne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb. Oto, jak różne ustawienia częstotliwości wpływają na efektywność zabiegu:

Niska Częstotliwość (1–200 Hz)

Zastosowanie: Długotrwała terapia przewlekłego bólu, stany zapalne, relaksacja mięśni, poprawa snu i redukcja stresu.

Korzyści: Niższe częstotliwości zapewniają łagodniejszą stymulację, sprzyjając relaksacji i regeneracji tkanek. Dzięki delikatnemu działaniu nadają się do dłuższych sesji, wspomagając łagodzenie bólu i zmniejszanie napięcia mięśniowego.

Zalecenie: Wybierz niższą częstotliwość, jeśli dopiero rozpoczynasz terapię lub masz wrażliwą skórę, by uniknąć dyskomfortu.

Średnia Częstotliwość (200–500 Hz)

Zastosowanie: Terapia regeneracyjna, redukcja stanów zapalnych, wspomaganie odbudowy tkanek i stymulacja układu odpornościowego.

Korzyści: Średni zakres częstotliwości zapewnia bardziej intensywne działanie, co wspiera regenerację i poprawę cyrkulacji. Może być stosowany zarówno w przewlekłych, jak i w ostrych stanach wymagających zwiększonej stymulacji.

Wysoka Częstotliwość (500–1000 Hz)

Zastosowanie: Szybkie łagodzenie ostrego bólu, stymulacja intensywnej regeneracji, wspomaganie szybkiego powrotu do formy.

Korzyści: Wyższe częstotliwości pozwalają na głęboką stymulację tkanek, poprawiając krążenie i intensyfikując produkcję energii komórkowej (ATP). Idealne w krótszych, intensywnych sesjach mających na celu szybką regenerację.

Uwagi: Przy wysokich częstotliwościach intensywność terapii może być bardziej odczuwalna. Zaleca się stosowanie krótszych sesji oraz unikanie terapii na bardzo wrażliwych obszarach ciała.

Zalecenia Ogólne

Dostosuj częstotliwość do swoich potrzeb, zaczynając od niższych wartości i zwiększając je stopniowo. Każdy organizm może reagować inaczej, dlatego obserwuj, jak ciało reaguje na terapię, aby znaleźć optymalny zakres dla siebie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MW300 PRO
Maksymalna moc diod LED	300W
Pobór prądu (max)	100W
Ilość diod LED	60 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali	630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki	30°
Żywotność	~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm (MIERNIK SOLARNY)	~186/130/103 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm	0.0 V/m oraz 0.0 μT
Napięcie operacyjne	AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie	NIE
Migotanie	NIE
Hałas (dB) przy 15 cm	<52
Ilość wentylatorów	1
Wymiary lampy	350*192*60mm
Waga lampy	4.2 kg
Wymiary opakowania	455*400*95mm
Waga z opakowaniem	5.5 kg
Funkcje Smart	<ol style="list-style-type: none"> 1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MW600 PRO
Maksymalna moc diod LED	540W
Pobór prądu (max)	200W
Ilość diod LED	108 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali	630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki	30°
Żywotność	~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm (MIERNIK SOLARNY)	~186/130/103 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm	0.0 V/m oraz 0.0 μT
Napięcie operacyjne	AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie	NIE
Migotanie	NIE
Hałas (dB) przy 15 cm	<52
Ilość wentylatorów	2
Wymiary lampy	414*278.6*60mm
Waga lampy	6.8 kg
Wymiary opakowania	58.5*33*12cm
Waga z opakowaniem	8.0 kg
Funkcje Smart	<ol style="list-style-type: none"> 1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MW1500 PRO
Maksymalna moc diod LED	1620W
Pobór prądu (max)	500W
Ilość diod LED	324 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali	630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki	30°
Żywotność	~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm (MIERNIK SOLARNY)	~186/130/103 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm	0.0 V/m oraz 0.0 μT
Napięcie operacyjne	AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie	NIE
Migotanie	NIE
Hałas (dB) przy 15 cm	<53
Ilość wentylatorów	3
Wymiary lampy	85*37*6cm
Waga lampy	12.7 kg
Wymiary opakowania	100*46*18cm
Waga z opakowaniem	16.4 kg
Funkcje Smart	<ol style="list-style-type: none"> 1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MW2000 PRO
Maksymalna moc diod LED	2160W
Pobór prądu (max)	660W
Ilość diod LED	432 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali	630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki	30°
Żywotność	~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm (MIERNIK SOLARNY)	~186/130/103 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm	0.0 V/m oraz 0.0 μT
Napięcie operacyjne	AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie	NIE
Migotanie	NIE
Hałas (dB) przy 15 cm	<53
Ilość wentylatorów	5
Wymiary lampy	110*37*6cm
Waga lampy	15.5 kg
Wymiary opakowania	127*46*18cm
Waga z opakowaniem	20.5 kg
Funkcje Smart	<ol style="list-style-type: none"> 1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MW3000 PRO
Maksymalna moc diod LED	3240W
Pobór prądu (max)	1000W
Ilość diod LED	648 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali	630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki	30°
Żywotność	~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm (MIERNIK SOLARNY)	~186/130/103 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm	0.0 V/m oraz 0.0 μT
Napięcie operacyjne	AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie	NIE
Migotanie	NIE
Hałas (dB) przy 15 cm	<53
Ilość wentylatorów	6
Wymiary lampy	160*37*6cm
Waga lampy	27 kg
Wymiary opakowania	171*56*17.5cm
Waga z opakowaniem	37 kg
Funkcje Smart	<ol style="list-style-type: none"> 1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

PRZECIWWSKAZANIA

Stosowanie terapii czerwonym światłem jest uznawane za metodę bezpieczną i nieinwazyjną. Mimo to, w pewnych okolicznościach jej zastosowanie może być niezalecane.

- Cięża i Karmienie Piersią: zaleca się unikanie terapii czerwonym światłem dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, ze względu na brak jednoznacznych danych naukowych.
- Fotouczulenie i Leki Wzmagające Uczulenie na Światło: Jeśli stosujesz medykamenty zwiększające wrażliwość na światło, konieczna jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem sesji.
- Problemy z Oczami: Osoby z dolegliwościami ocznymi lub zwiększoną wrażliwością na światło powinny skonsultować się z okulistą przed zastosowaniem terapii.
- Nowotwory Skórne: Nie zaleca się korzystania z terapii czerwonym światłem w przypadku diagnozy nowotworów skórnych bez wcześniejszej konsultacji z onkologiem.
- Padaczka: Osoby z padaczką muszą zachować ostrożność, ponieważ terapia może indukować niewidoczne migotanie, mogące wywołać napad.
- Oparzenia Skórne: W przypadku świeżych oparzeń, terapia może nie być zalecana. Dodatkowe ciepło może pogorszyć stan skóry.
- Otwarte Zranienia: Terapia może podrażnić otwarte rany i wpłynąć na proces krzepnięcia, co jest niewskazane.
- Stan Gorączkowy: W sytuacji podwyższonej temperatury ciała, dodatkowe ciepło generowane przez terapię może być niewłaściwe i pogorszyć stan zdrowia.
- Tatuaze: Osoby z tatuażami, szczególnie z czerwonym atramentem, powinny być ostrożne, gdyż terapia może wpłynąć na kolorystykę tatuażu.



POTENCJALNE SKUTKI UBOCZNE

Terapia czerwonym światłem jest zazwyczaj dobrze tolerowana i mało inwazyjna, ale jak każda forma terapii, może mieć pewne skutki uboczne:

- Czasowe zaczerwienienie w miejscu naświetlania jest jednym z najbardziej powszechnych działań niepożądanych.
- Suchość i Podrażnienie: Po zastosowaniu terapii niektóre osoby mogą odczuwać suchość lub podrażnienie skóry.
- Dyskomfort Oczu: Mimo że czerwone światło jest generalnie uznawane za bezpieczne dla oczu, dłuższa ekspozycja może wywołać lekki dyskomfort.
- Efekty Tymczasowe: W rzadkich sytuacjach mogą wystąpić chwilowe objawy, takie jak ból głowy czy uczucie mdłości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zachować żywotność i funkcjonalność panelu LED, zawsze przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu. Urządzenia do terapii światłem czerwonym powinny być obsługiwane wyłącznie w oparciu o wytyczne przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi. Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników.

Aby zapewnić bezpieczeństwo nie wykonuj żadnej z poniższych czynności:

- NIE zanurzaj urządzenia w wodzie
- NIE myj części elektrycznych wodą ani innymi płynami
- NIE dotykaj urządzenia, wtyczek, przewodów mokrymi rękami
- NIE ciągnij, nie przenoś, nie podnoś urządzenia za przewód
- NIE używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub zetknęło się z wodą lub płynami.
- NIE używaj urządzenia jeżeli zostało uszkodzone
- NIE używaj urządzenia w pobliżu innych promienników ciepła
- NIE modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie
- NIE używaj ani nie przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach, które są lub mogą przekraczać 54°C (130°F)
- NIE używaj ani nie przechowuj urządzenia przy względnej wilgotności przekraczającej 93%
- NIE pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej
- NIE przekraczaj 20 minut stosowania w 1 sesji, jeżeli lekarz nie zalecił inaczej
- NIE zakrywaj wentylatorów podczas korzystania z urządzenia
- NIE podłączaj urządzenia do napięcia innego niż wskazane na tabliczce znamionowej
- Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, ruchowymi czy intelektualnymi, NIE powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby kompetentnej lub bez wcześniejszego przeszkolenia dotyczącego bezpiecznego użytkowania urządzenia.
- NIE pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci jeżeli go nie używasz


CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA URZĄDZENIA

Zalecamy czyszczenie urządzenia w następujący sposób:

- Odłącz urządzenie z zasilania i poczekaj aż ostygnie.
- Używaj tylko i wyłącznie wilgotnej ściereczki z mikrofibry i upewnij się aby do urządzenia nie dostała się woda
- Nie używaj silnych środków czystości
- Ponowne włączenie urządzenia może nastąpić dopiero w momencie kiedy będzie całkowicie suche.

UTYLIZACJA

Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że po zakończeniu użytkowania lub niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

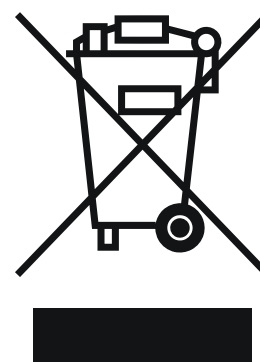

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zwrotu.

GWARANCJA & SERWIS

Nazwa sprzętu: Lampa LED do terapii światłem czerwonym

Model: zgodny z tabliczką znamionową

Numer partii: zgodny z tabliczką znamionową

Dystrybutor produktów mitowell firma GWBL Sp. z o.o. (zwana dalej "Gwarantem") z siedzibą przy ulicy Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów, Polska udziela gwarancji na ten produkt na następujących warunkach i w poniżej opisanym zakresie:

- W przypadku braku zgodności sprzętu z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Gwarant udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty zakupu nowego, nieużywanego produktu. Gwarant zapewnia, że oferowane do sprzedaży urządzenia są wolne od wad.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych. Usunięcie wad lub usterek w ramach niniejszej gwarancji odbędzie się poprzez naprawę sprzętu, bądź poprzez jego wymianę lub wymianę uszkodzonego elementu na nowy, wolny od wad.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia poprzez wiadomość email na warranty@mitowell.eu
- Ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji wady, usuwane będą w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy lub serwisu producenta. Termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy.



Wykluczenia gwarancji:

- normalnego zużycia, związanego z bieżącą eksploatacją dostarczonych akcesoriów, które używają się w trakcie prawidłowego użytkowania (np okularów do ochrony oczu, baterii) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, upadkiem urządzenia, czy też innymi formami fizycznego uszkodzenia.
- gwarancja nie obowiązuje w przypadku szkód wynikających z niewłaściwej instalacji, konserwacji lub obsługi urządzenia.
- jakiegokolwiek nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub otwarcie urządzenia skutkują utratą gwarancji.
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przepięciami, czy też podłączeniem do sieci z niewłaściwym napięciem.
- gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z ekstremalnych warunków środowiskowych, takich jak ekstremalne temperatury, wilgotność czy ekspozycja na substancje chemiczne.
- gwarancja nie obowiązuje, jeżeli urządzenie było używane w sposób niezgodny z dołączoną instrukcją obsługi.
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe takie jak pożary, powódzie, trzęsienia ziemi itd.
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego przenoszenia lub transportu urządzenia.
- gwarancja nie obowiązuje dla produktów, które były zakupione jako używane bądź oznaczone jako "outlet".

PRODUCENT & IMPORTER & DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Gbeing Smart Ag Co., Ltd.
2nd Floor, Building 5, No. 226,
Guangtian Road, Songgang, Tangxiayong,
Bao'an District, Shenzhen, China



Niniejszym **Gbeing Smart Ag Co., Ltd.** oświadcza, że modele urządzeń z niniejszej instrukcji obsługi są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.

Deklaracja zgodności do pobrania:

<https://www.mitowell.eu/declaration/MW-series.pdf>

Wyprodukowano: Chiny

Importer Polska:

MGTW Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 22B,
34-120 Andrychów,
info@mgtw.pl



OSTRZEŻENIA & ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie terapii czerwonym światłem lub jakiegokolwiek innej formy leczenia, zalecamy konsultację z wykwalifikowanym lekarzem medycznym. Niektóre osoby mogą być bardziej wrażliwe na terapię światłem i mogą wystąpić niepożądane efekty uboczne. Producent nie gwarantuje skuteczności terapii ani nie ponosi odpowiedzialności za jej ewentualne skutki uboczne.

Korzystanie z urządzeń do terapii czerwonym światłem odbywa się na własne ryzyko. Wszelkie decyzje dotyczące zdrowia i leczenia powinny być podejmowane w konsultacji z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie medycyny. Producent tej publikacji nie jest uprawniony do udzielania porad medycznych, a informacje zawarte w tej instrukcji nie mają na celu diagnozowania, leczenia ani zapobiegania żadnym chorobom.

Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas naświetlania panelem LED lub masz wątpliwości dotyczące terapii czerwonym światłem, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się ze swoim lekarzem.



NOTATKI

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



MITOWELL



WWW.MITOWELL.PL



INFO@MITOWELL.PL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I FILMY INSTRUKTAŻOWE

Instrukcję obsługi i filmy instruktażowe można znaleźć tutaj:

<https://mitowell.eu/user-manual>

SOCIAL MEDIA:



/MITOWELLPL



/MITOWELLPL



/@MITOWELLPL



/MITOWELLPL