



MITOWELL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MW300 PRO

MW600 PRO

MW1500 PRO

MW2000 PRO

MW3000 PRO




MITOWELL



SPIS TREŚCI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA	4
CZAS NAŚWIETLANIA & CZĘSTOTLIWOŚĆ	4
CZYM JEST TERAPIA CZERWONYM ŚWIATŁEM	5
INSTALACJA I URUCHOMIENIE	7
MONTAŻ PODSTAWY JEZDNEJ	7
FUNKCJE I SPOSÓB STEROWANIA	8
FUNKCJA PULSOWANIA (TRYB PULSE)	10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	11
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	16
POTENCJALNE SKUTKI UBOCZNE	16
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	17
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA URZĄDZENIA	18
UTYLIZACJA	18
GWARANCJA & SERWIS	19
PRODUCENT & IMPORTER & DEKLARACJA ZGODNOŚCI	20
OSTRZEŻENIA & ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI	20

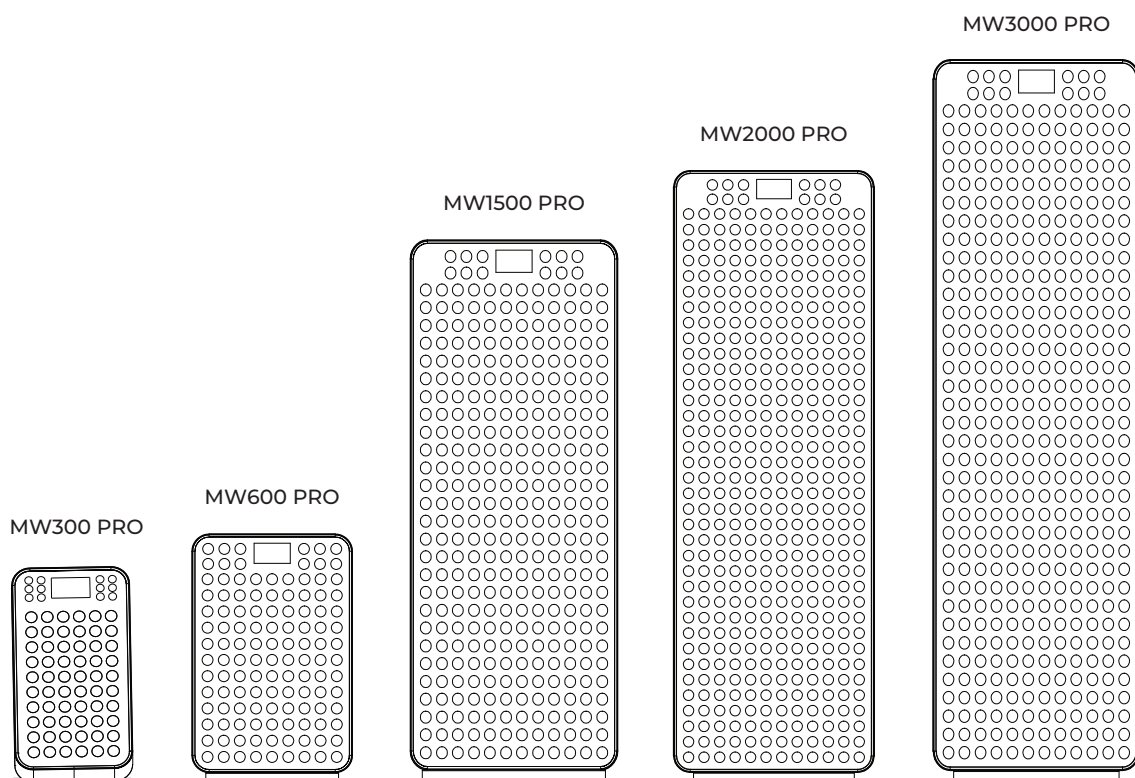

WSTĘP



WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Lampy Mitowell nie są wyrobami medycznymi i nie służą do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Nasze produkty są niskiego ryzyka, przeznaczone do branży wellness / fitness / beauty.

Zostały zaprojektowane w celu wspierania ogólnego stanu zdrowia poprzez stymulację procesów komórkowych. Produkt nie jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń w domu.

W przypadku wątpliwości co do wpływu terapii na zdrowie należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.




CZAS NAŚWIETLANIA & CZĘSTOTLIWOŚĆ

Dla optymalnych korzyści, w tym oddziaływania na tkanki głębokie, zalecane są sesje trwające 5-20 minut dla każdego obszaru, który chcesz poddać terapii, w odległości około 30 cm od urządzenia.

Dobłą praktyką jest rozpoczynanie terapii od krótszych sesji i wydłużenie ich w zależności od reakcji organizmu.

Czas i odległość mogą różnić się w zależności od indywidualnej reakcji na terapię. Światło podczerwone (830nm + 850nm) oddziałuje na tkanki głębokie, a czerwone światło (630nm + 660nm) jest korzystne dla skóry. Ponadto istnieje wiele innych korzyści, o których przeczytasz na naszym blogu mitowell.pl/blog

Oba rodzaje światła można używać jednocześnie i jest to zalecane, ponieważ światło czerwone i podczerwone się uzupełniają.

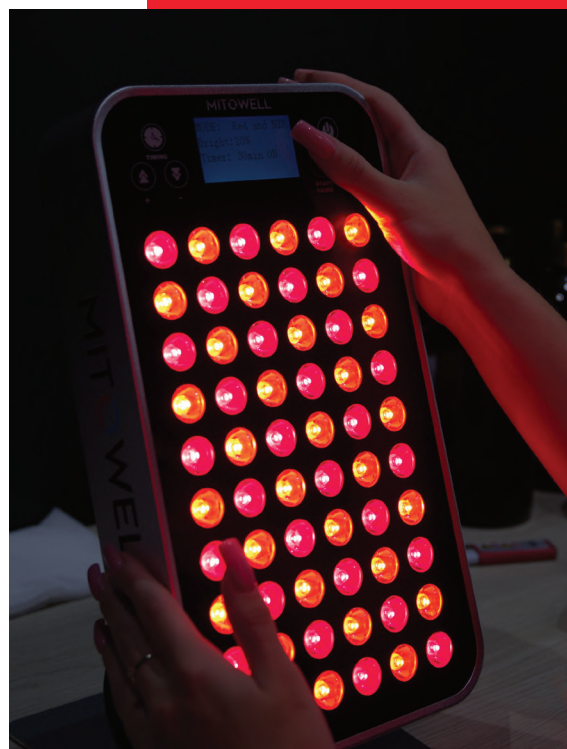

OCHRONA OCZU


Podczas korzystania z lampy nie ma konieczności stosowania ochrony oczu. Wystarczy nie patrzeć bezpośrednio na świecące diody – można po prostu zamknąć oczy. W przypadku odczuwania dyskomfortu zalecamy skorzystanie z dołączonych do zestawu okularów ochronnych.

UBRANIA

Upewnij się, że obszar ciała, który poddajesz zabiegowi, jest całkowicie wystawiony na działanie światła i nie jest zakryty żadną tkaniną ani ubraniem, może to obniżyć korzyści płynące z terapii.

CZYM JEST TERAPIA CZERWONYM ŚWIATŁEM

Terapia światłem jest jedną z najstarszych znanych metod wspierania organizmu. Pierwsze zastosowania terapii słonecznej odnotowano w Egipcie, a różne formy terapii światłem były również praktykowane przez starożytnych Greków, Chińczyków i Hindusów

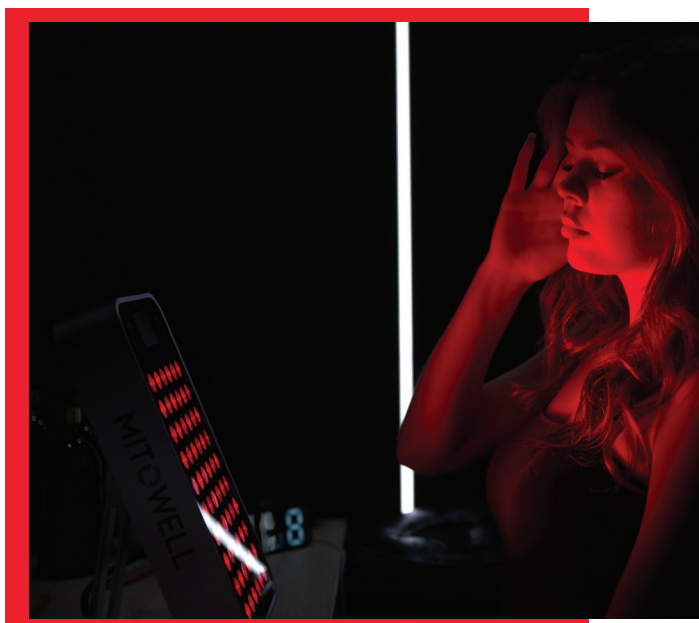

Nie ma wątpliwości, że światło wpływa biologicznie na organizm; w rzeczywistości, zdrowy organizm potrzebuje światła.

Obecne badania potwierdzają, jak różne długości fal świetlnych wpływają na ciało na poziomie komórkowym.

Wszystkie długości fal świetlnych mieszczą się w pewnym spektrum. Czerwone i podczerwone światło o długości fali 630, 660 oraz 830, 850 nanometrów (nm) jest szczególnie korzystne.

Istnieją dwa kluczowe mechanizmy odpowiadające za skuteczność terapii czerwonym światłem:



Stymulacja Produkcji ATP


Terapia ta oddziałuje na mitochondria w komórkach, które są "elektrowniami" produkującymi energię w postaci ATP. Dzięki naświetlaniu czerwonym światłem, produkcja ATP jest zwiększana, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie komórek i całego organizmu.



Hormeza

Krótkotrwałe naświetlanie skóry czerwonym światłem może wywołać niewielki stres w komórkach, co w efekcie prowadzi do wzmocnienia ich naturalnych mechanizmów obronnych. To z kolei wpływa na lepszą odporność i ogólne zdrowie

W praktyce oznacza to, że terapia czerwonym światłem może poprawić procesy komórkowe i zwiększyć odporność organizmu. Jest to metoda wspomagająca organizm na poziomie komórkowym. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w naszym poradniku dotyczącym terapii czerwonym światłem, który został dołączony do lampy.

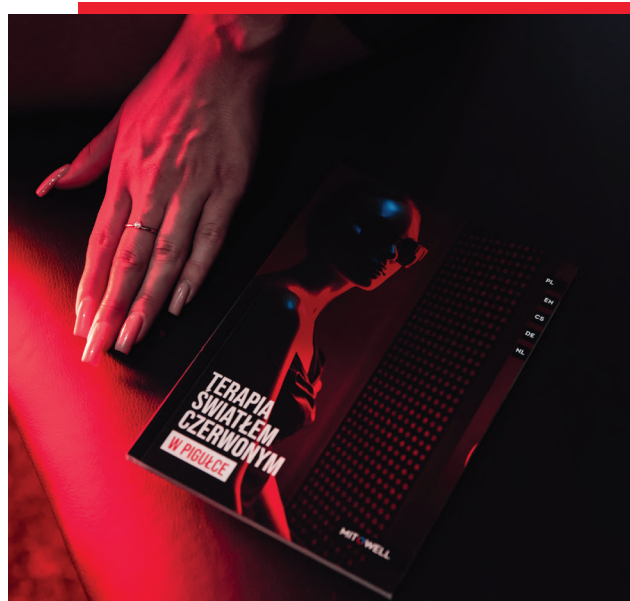


INSTALACJA I URUCHOMIENIE

- 1 Wyjmij urządzenie z opakowania.
- 2 Przed użyciem urządzenia usuń całe opakowanie.
- 3 Przed użyciem sprawdź, czy obudowa, kabel zasilający nie posiadają widocznych uszkodzeń.
- 4 Połóż urządzenie na prostej, stabilnej powierzchni.
- 5 Upewnij się, że podłączasz urządzenie do sieci o napięciu zgodnym z tym, które znajduje się na tabliczce znamionowej.
- 6 Kabel sieciowy podłącz w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe potknięcie się o niego.


MONTAŻ PODSTAWY JEZDNEJ

Wersje MW1500 PRO i MW2000 PRO oferują możliwość opcjonalnego montażu kółek, co ułatwia przemieszczanie lampy. Dzięki tej funkcji transport urządzenia staje się wygodniejszy i bardziej praktyczny.

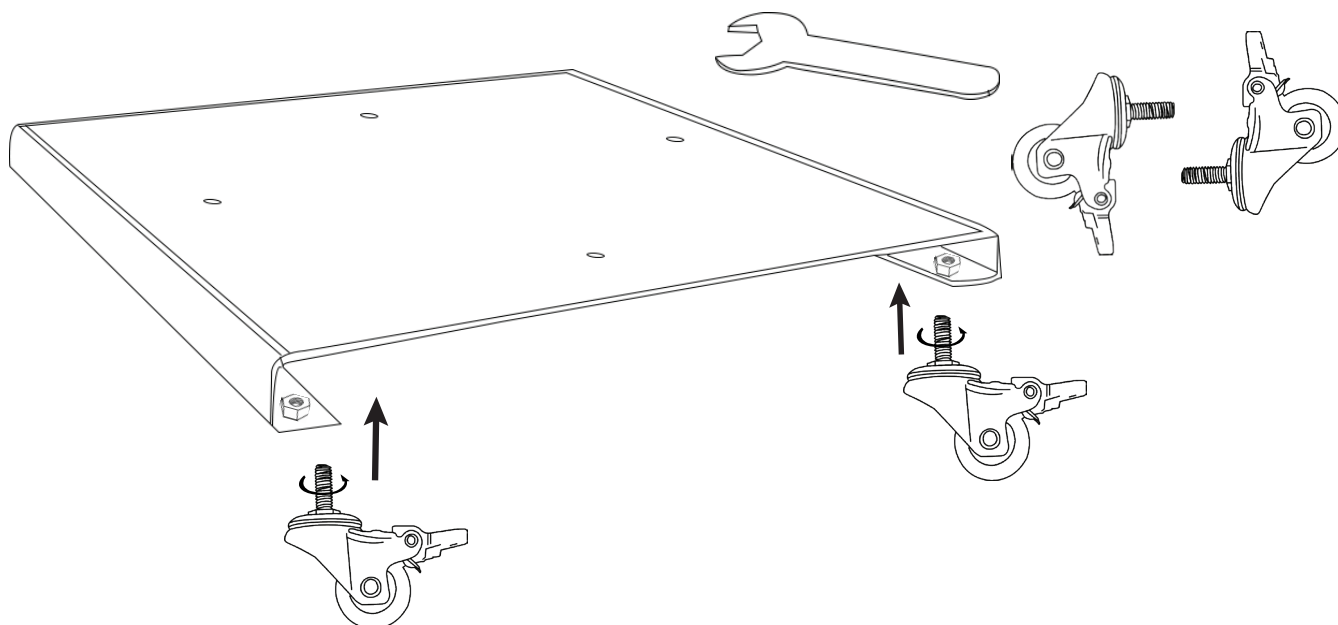

Do platformy w wyznaczonym miejscu włóż kółko (patrz infografika), następnie z pomocą dołączonego klucza dokręć gwint kółka zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powtórz tę czynność w każdym rogu platformy.

FUNKCJE I SPOSÓB STEROWANIA

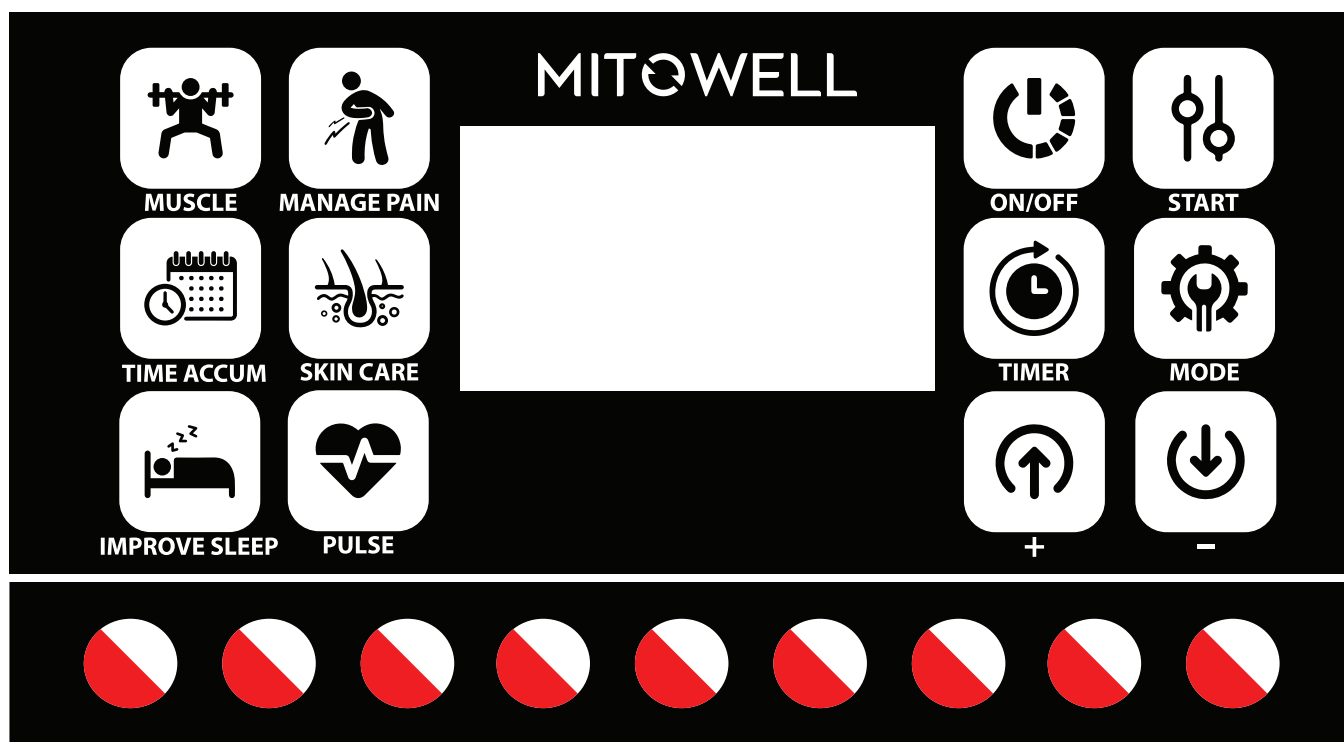



MANAGE PAIN
Tryb wsparcia redukcji bólu
(RED 100% + NIR 100%)



MUSCLE
Tryb wsparcia mięśni
(RED 50% + NIR 100%)



PULSE
Tryb pulsowania
1-1000 Hz



SKIN CARE
Tryb wsparcia pielęgnacji skóry
(RED 100% + NIR 0%)



IMPROVE SLEEP
Tryb wsparcia poprawy snu
(RED 50%)



TIME ACCUM
Licznik roboczogodzin
lampy



ON/OFF
Włączenie i wyłączenie lampy
do terapii światłem czerwonym.



MODE
Dostępne 3 tryby:
NIR, RED, RED i NIR



START
Rozpoczęcie pracy
oraz pauza pracy lampy



TIMER
Czasomierz od 1 do 60 minut
Domyślny czas: 30 minut




+
Jasność w górę: 10 ~ 100%
Czasomierz/Zwiększenie: 1 ~ 60 min
Pulsowanie: 1 ~ 1000 Hz




-
Jasność w dół: 100 ~ 10%
Czasomierz/Zmniejszenie: 60 ~ 1 min
Pulsowanie: 1000 ~ 1 Hz

Wskazówki dotyczące korzystania ze zdalnego pilota:

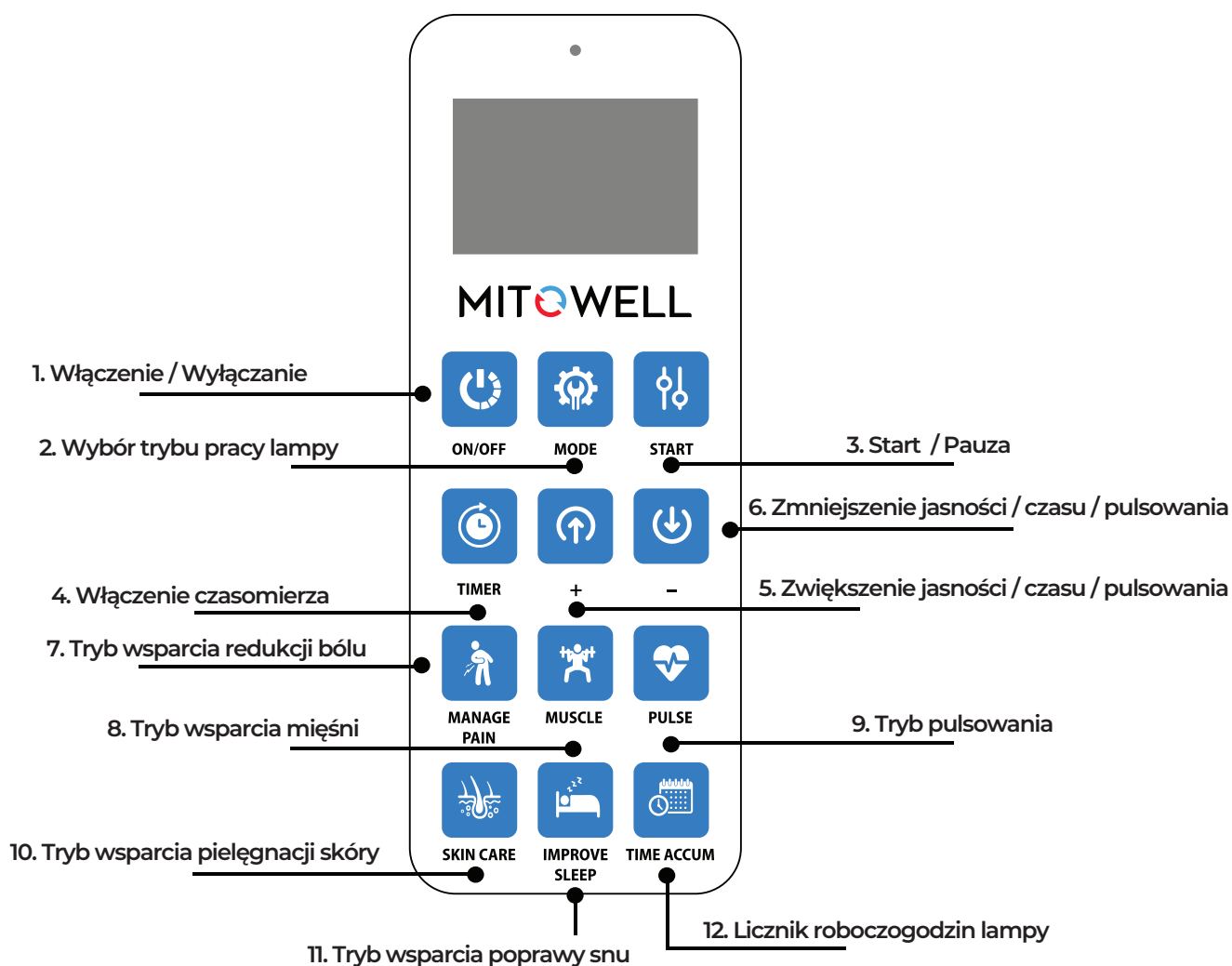

KONTROLA WIELU PANELÓW

Jeden pilot może sterować wieloma urządzeniami w tym samym czasie.

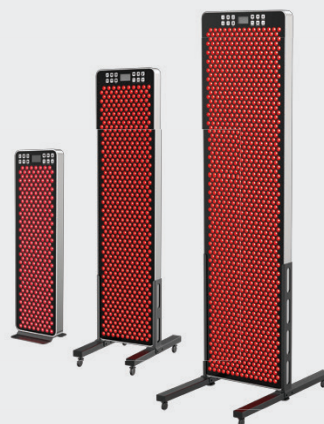

PAROWANIE PILOTA

1. Podłącz przewód do lampy, ale nie włączaj przełącznika z tyłu.
2. Przytrzymaj przycisk START / PAUSE na pilocie przez 5 sekund.
3. Włącz panel przełącznikiem cały czas trzymając START / PAUSE na pilocie. Usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe, które wskazują, że parowanie zostało zakończone.
4. Jeśli parowanie się nie powiedzie, wróć do punktu 1.

FUNKCJA PULSOWANIA (TRYB PULSE)

Tryb pulsacyjny rytmicznie włącza i wyłącza światło, co w niektórych przypadkach może zwiększyć skuteczność terapii, pozwalając komórkom na "odpoczynek" i lepszą reakcję na bodziec.

PODSTAWOWE TRYBY TERAPEUTYCZNE:

TRYB CIĄGŁY (CW-0 Hz)

Zastosowanie: Uniwersalny tryb do codziennego wellness, pielęgnacji skóry i ogólnej regeneracji.

Zalety: Dostarcza maksymalną dawkę energii w danym czasie, jest dobrze tolerowany i nie powoduje migotania.

Wskazówka: Jeśli nie masz konkretnego, udokumentowanego celu - zacznij od tego trybu.

TRYB REGENERACJA (10 Hz)

Zastosowanie: Wsparcie regeneracji tkanek, naturalne wsparcie przeciwzapalne, regeneracja po wysiłku fizycznym.

Wskazówka: Migotanie jest mocno widoczne - używaj dołączonych okularów ochronnych.

TRYB SKUPIENIE (40 Hz)

Zastosowanie: Potencjalne wsparcie funkcji poznawczych, koncentracji i jasności umysłu.

Wskazówka: Traktuj jako tryb eksperymentalny - badania głównie na modelach zwierzęcych. Migotanie jest mocno widoczne - używaj dołączonych okularów ochronnych.

TRYB EKSPERYMENTALNY (100-1000 Hz)

Zastosowanie: Dla zaawansowanych użytkowników chcących świadomie eksperymentować.

Uwaga: Obecnie brak silnych dowodów na przewagę tego zakresu nad trybem ciągłym lub 10/40 Hz.

- 100-500 Hz: Minimalne, ledwo odczuwalne migotanie.

- 500-1000 Hz: Dla komórek i oka efekt jest biologicznie zbliżony do trybu ciągłego.

Wskazówka: Migotanie jest niezauważalne dla oka.

WAŻNE INFORMACJE O DAWKOWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE

WPLYW NA DAWKĘ: Tryb pulsacyjny (przy cyklu pracy 50%) dostarcza około połowę (50%) energii trybu ciągłego w tym samym czasie. Aby uzyskać tę samą dawkę, może być konieczne wydłużenie sesji.



BEZPIECZEŃSTWO

Epilepsja/migreny: Unikaj niskich częstotliwości (5-40 Hz) lub skonsultuj się z lekarzem.

Oczy: Nigdy nie stosuj na oczy bez okularów ochronnych, szczególnie w trybach pulsacyjnych w zakresie 5-100 Hz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		MW300 PRO
Maksymalna moc diod LED		300W
Pobór prądu (max)		100W
Ilość diod LED		60 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali		630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki		30°
Żywotność		~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm MIERNIK SOLARNY / PROFESJONALNY SPEKTROMETR		~186/130/103 mW/cm ² ~180/70/60 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm		0.0 V/m oraz 0.0 µT
Napięcie operacyjne		AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie		NIE
Migotanie		NIE
Hałas (dB) przy 15 cm		<52
Ilość wentylatorów		1
Wymiary lampy		350*192*60mm
Waga lampy		4.2 kg
Wymiary opakowania		455*400*95mm
Waga z opakowaniem		5.5 kg
Funkcje Smart		1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		MW600 PRO
Maksymalna moc diod LED		540W
Pobór prądu (max)		200W
Ilość diod LED		108 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali		630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki		30°
Żywotność		~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm MIERNIK SOLARNY / PROFESJONALNY SPEKTROMETR		~186/130/103 mW/cm ² ~180/70/60 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm		0.0 V/m oraz 0.0 µT
Napięcie operacyjne		AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie		NIE
Migotanie		NIE
Hałas (dB) przy 15 cm		<52
Ilość wentylatorów		2
Wymiary lampy		414*278.6*60mm
Waga lampy		6.8 kg
Wymiary opakowania		58.5*33*12cm
Waga z opakowaniem		8.0 kg
Funkcje Smart		1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		MW1500 PRO
Maksymalna moc diod LED		1620W
Pobór prądu (max)		500W
Ilość diod LED		324 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali		630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki		30°
Żywotność		~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm MIERNIK SOLARNY / PROFESJONALNY SPEKTROMETR		~186/130/103 mW/cm ² ~180/70/60 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm		0.0 V/m oraz 0.0 µT
Napięcie operacyjne		AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie		NIE
Migotanie		NIE
Hałas (dB) przy 15 cm		<53
Ilość wentylatorów		3
Wymiary lampy		85*37*6cm
Waga lampy		12.7 kg
Wymiary opakowania		100*46*18cm
Waga z opakowaniem		16.4 kg
Funkcje Smart		1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		MW2000 PRO
Maksymalna moc diod LED		2160W
Pobór prądu (max)		660W
Ilość diod LED		432 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali		630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki		30°
Żywotność		~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm MIERNIK SOLARNY / PROFESJONALNY SPEKTROMETR		~186/130/103 mW/cm ² ~180/70/60 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm		0.0 V/m oraz 0.0 µT
Napięcie operacyjne		AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie		NIE
Migotanie		NIE
Hałas (dB) przy 15 cm		<53
Ilość wentylatorów		5
Wymiary lampy		110*37*6cm
Waga lampy		15.5 kg
Wymiary opakowania		127*46*18cm
Waga z opakowaniem		20.5 kg
Funkcje Smart		1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MW3000 PRO
Maksymalna moc diod LED	3240W
Pobór prądu (max)	1000W
Ilość diod LED	648 szt. DUAL-CHIP 5W
Długość fali	630, 660, 830, 850 nm (1:1:1:1)
Kąt świecenia soczewki	30°
Żywotność	~ 50 000 godz.
Natężenie promieniowania 3/15/30 cm MIERNIK SOLARNY / PROFESJONALNY SPEKTROMETR	~186/130/103 mW/cm ² ~180/70/60 mW/cm ²
Emisja EMF przy 15 cm	0.0 V/m oraz 0.0 µT
Napięcie operacyjne	AC: 220-230V~ 50-60Hz
Montaż na statywie	NIE
Migotanie	NIE
Hałas (dB) przy 15 cm	<53
Ilość wentylatorów	6
Wymiary lampy	160*37*6cm
Waga lampy	27 kg
Wymiary opakowania	171*56*17.5cm
Waga z opakowaniem	37 kg
Funkcje Smart	1. RED - Czerwone: 630, 660 nm 2. NIR - Podczerwone: 830, 850 nm 3. RED + NIR - oba: 630, 660, 830, 850 nm 4. MANAGE PAIN - Tryb wsparcia redukcji bólu (RED 100% + NIR 100%) 5. MUSCLE - Tryb wsparcia mięśni (RED 50% + NIR 100%) 6. PULSE - Tryb pulsowania (1-1000 Hz) 7. SKIN CARE - Tryb wsparcia pielęgnacji skóry (RED 100% + NIR 0%) 8. IMPROVE SLEEP - Tryb wsparcia poprawy snu (RED 50%)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Stosowanie terapii czerwonym światłem jest uznawane za metodę bezpieczną i nieinwazyjną. Mimo to, w pewnych okolicznościach jej zastosowanie może być niezalecane.

- Ciąża i Karmienie Piersią: zaleca się unikanie terapii czerwonym światłem dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, ze względu na brak jednoznacznych danych naukowych.
- Fotouczulenie i Leki Wzmagające Uczulenie na Światło: Jeśli stosujesz medykamenty zwiększające wrażliwość na światło, konieczna jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem sesji.
- Problemy z Oczami: Osoby z dolegliwościami ocznymi lub zwiększoną wrażliwością na światło powinny skonsultować się z okulistą przed zastosowaniem terapii.
- Nowotwory Skórne: Nie zaleca się korzystania z terapii czerwonym światłem w przypadku diagnozy nowotworów skórnych bez wcześniejszej konsultacji z onkologiem.
- Padaczka: Osoby z padaczką muszą zachować ostrożność, ponieważ terapia może indukować niewidoczne migotanie, mogące wywołać napad.
- Oparzenia Skórne: W przypadku świeżych oparzeń, terapia może nie być zalecana. Dodatkowe ciepło może pogorszyć stan skóry.
- Otwarte Zranienia: Nie stosować na otwarte rany. Światło może pobudzić krążenie w okolicy zranienia, co w tym przypadku jest niewskazane.
- Stan Gorączkowy: W sytuacji podwyższonej temperatury ciała, dodatkowe ciepło generowane przez terapię może być niewłaściwe i pogorszyć stan zdrowia.
- Tatuaze: Osoby z tatuażami, szczególnie z czerwonym atramentem, powinny być ostrożne, gdyż terapia może wpłynąć na kolorystykę tatuażu.



POTENCJALNE SKUTKI UBOCZNE

Terapia czerwonym światłem jest zazwyczaj dobrze tolerowana i mało inwazyjna, ale jak każda forma terapii, może mieć pewne skutki uboczne:

- Czasowe zaczerwienienie w miejscu naświetlania jest jednym z najczęściej występujących reakcji.
- Suchość i Podrażnienie: Po zastosowaniu terapii niektóre osoby mogą odczuwać suchość lub podrażnienie skóry.
- Dyskomfort Oczu: Mimo że czerwone światło jest generalnie uznawane za bezpieczne dla oczu, dłuższa ekspozycja może wywołać lekki dyskomfort.
- Efekty Tymczasowe: W rzadkich sytuacjach mogą wystąpić chwilowe objawy, takie jak ból głowy czy uczucie mdłości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zachować żywotność i funkcjonalność panelu LED, zawsze przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu. Urządzenia do terapii światłem czerwonym powinny być obsługiwane wyłącznie w oparciu o wytyczne przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi. Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników.

Aby zapewnić bezpieczeństwo nie wykonuj żadnej z poniższych czynności:

- NIE zanurzaj urządzenia w wodzie
- NIE myj części elektrycznych wodą ani innymi płynami
- NIE dotykaj urządzenia, wtyczek, przewodów mokrymi rękami
- NIE ciągnij, nie przenoś, nie podnoś urządzenia za przewód
- NIE używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub zetknęło się z wodą lub płynami.
- NIE używaj urządzenia jeżeli zostało uszkodzone
- NIE używaj urządzenia w pobliżu innych promienników ciepła
- NIE modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie
- NIE używaj ani nie przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach, które są lub mogą przekraczać 54°C (130°F)
- NIE używaj ani nie przechowuj urządzenia przy względnej wilgotności przekraczającej 93%
- NIE pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej
- NIE przekraczaj 20 minut stosowania w 1 sesji, jeżeli lekarz nie zalecił inaczej
- NIE zakrywaj wentylatorów podczas korzystania z urządzenia
- NIE podłączaj urządzenia do napięcia innego niż wskazane na tabliczce znamionowej
- Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, ruchowymi czy intelektualnymi, NIE powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby kompetentnej lub bez wcześniejszego przeszkolenia dotyczącego bezpiecznego użytkowania urządzenia.
- NIE pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci jeżeli go nie używasz


CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA URZĄDZENIA

Zalecamy czyszczenie urządzenia w następujący sposób:

- Odłącz urządzenie z zasilania i poczekaj aż ostygnie.
- Używaj tylko i wyłącznie wilgotnej ściereczki z mikrofibry i upewnij się aby do urządzenia nie dostała się woda
- Nie używaj silnych środków czystości
- Ponowne włączenie urządzenia może nastąpić dopiero w momencie kiedy będzie całkowicie suche.

UTYLIZACJA

Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że po zakończeniu użytkowania lub niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

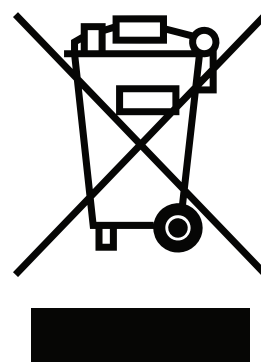

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zwrotu.

GWARANCJA & SERWIS

Nazwa sprzętu: Lampa LED do terapii światłem czerwonym

Model: zgodny z tabliczką znamionową

Numer partii: zgodny z tabliczką znamionową

Dystrybutor produktów mitowell firma GWBL Sp. z o.o. (zwana dalej "Gwarantem") z siedzibą przy ulicy Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów, Polska udziela gwarancji na ten produkt na następujących warunkach i w poniżej opisanym zakresie:

- W przypadku braku zgodności sprzętu z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- Gwarant udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty zakupu nowego, nieużywanego produktu. Gwarant zapewnia, że oferowane do sprzedaży urządzenia są wolne od wad.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych. Usunięcie wad lub usterek w ramach niniejszej gwarancji odbędzie się poprzez naprawę sprzętu, bądź poprzez jego wymianę lub wymianę uszkodzonego elementu na nowy, wolny od wad.
- Wady lub uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia poprzez wiadomość email na warranty@mitowell.eu
- Ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji wady, usuwane będą w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy lub serwisu producenta. Termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy.



Wykluczenia gwarancji:

- normalnego zużycia, związanego z bieżącą eksploatacją dostarczonych akcesoriów, które używają się w trakcie prawidłowego użytkowania (np okularów do ochrony oczu, baterii) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, upadkiem urządzenia, czy też innymi formami fizycznego uszkodzenia.
- gwarancja nie obowiązuje w przypadku szkód wynikających z niewłaściwej instalacji, konserwacji lub obsługi urządzenia.
- jakiegokolwiek nieautoryzowane modyfikacje, naprawy lub otwarcie urządzenia skutkują utratą gwarancji.
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przepięciami, czy też podłączeniem do sieci z niewłaściwym napięciem.
- gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z ekstremalnych warunków środowiskowych, takich jak ekstremalne temperatury, wilgotność czy ekspozycja na substancje chemiczne.
- gwarancja nie obowiązuje, jeżeli urządzenie było używane w sposób niezgodny z dołączoną instrukcją obsługi.
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe takie jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi itd.
- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego przenoszenia lub transportu urządzenia.
- gwarancja nie obowiązuje dla produktów, które były zakupione jako używane bądź oznaczone jako "outlet".

PRODUCENT & IMPORTER & DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

MGTW Sp. z o.o.
ul. Starowiejska 22B,
34-120 Andrychów,
info@mgtw.pl



Niniejszym **MGTW Sp. z o.o.** oświadcza, że modele urządzeń z niniejszej instrukcji obsługi są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.

Deklaracja zgodności do pobrania:

<https://www.mitowell.eu/declaration/MW-series.pdf>

Wyprodukowano: Chiny



OSTRZEŻENIA & ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie terapii czerwonym światłem lub jakiejkolwiek innej formy leczenia, zalecamy konsultację z wykwalifikowanym lekarzem medycznym. Niektóre osoby mogą być bardziej wrażliwe na terapię światłem i mogą wystąpić niepożądane efekty uboczne. Producent nie gwarantuje skuteczności terapii ani nie ponosi odpowiedzialności za jej ewentualne skutki uboczne.

Korzystanie z urządzeń do terapii czerwonym światłem odbywa się na własne ryzyko. Wszelkie decyzje dotyczące zdrowia i leczenia powinny być podejmowane w konsultacji z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie medycyny. Producent tej publikacji nie jest uprawniony do udzielania porad medycznych, a informacje zawarte w tej instrukcji nie mają na celu diagnozowania, leczenia ani zapobiegania żadnym chorobom.

Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas naświetlania panelem LED lub masz wątpliwości dotyczące terapii czerwonym światłem, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się ze swoim lekarzem.

MITOWELL



www.mitowell.PL



info@mitowell.PL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I FILMY INSTRUKTAŻOWE

Instrukcję obsługi i filmy instruktażowe można znaleźć tutaj:

<https://mitowell.eu/user-manual>

SOCIAL MEDIA:



[/mitowellPL](https://www.facebook.com/mitowellPL)



[/mitowellPL](https://www.instagram.com/mitowellPL)



[/@mitowellPL](https://www.youtube.com/@mitowellPL)



[/mitowellPL](https://twitter.com/mitowellPL)